

## EDMUS 5.7.1 – INSTRUCTIONS D'INSTALLATION EN RESEAU

Pour une **installation autonome** et non en réseau, veuillez consulter le document joint :  
« EDMUS 5.7.1 - Instructions d'installation.pdf ».


Pour pouvoir faire une NOUVELLE installation d'EDMUS,  
**vous devez avoir les droits d'administration sur l'ordinateur** (pour la durée de l'installation).

(Note : les illustrations ont été faites pour EDMUS 5.7, la nouvelle version mentionne « 5.7.1 »)

### Introduction

EDMUS comprend 2 éléments principaux :

- la base de données EDMUS (le fichier de données), contenant les données patients ;
- et le logiciel EDMUS proprement dit, qui accède à la base de données.

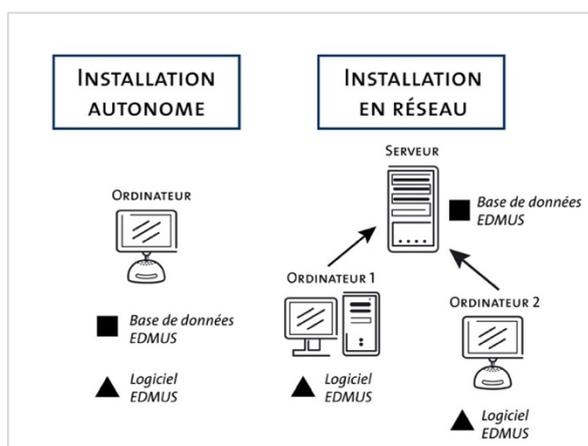

Ainsi, pour partager votre base de données EDMUS en réseau, et permettre à plusieurs ordinateurs d'accéder au même fichier de données, il vous suffit de suivre les 3 étapes suivantes :

1. Placez votre fichier base de données EDMUS sur un serveur.
2. Installez EDMUS sur chacun des ordinateurs qui doivent accéder à la base.
3. Configurez EDMUS pour qu'il utilise le fichier de données sur le serveur.

Puis répétez les étapes 2 et 3 ci-dessus sur chaque ordinateur qui doit accéder à la base de données.

#### Plusieurs circonstances sont possibles pour une installation en réseau :

- Il s'agit d'une première installation d'EDMUS.
- Vous aviez déjà une installation autonome d'une version antérieure d'EDMUS (4 ou 5), et vous souhaitez passer à une installation en réseau.
- Vous aviez déjà une installation en réseau d'une version antérieure d'EDMUS (4 ou 5), et vous souhaitez la mettre à jour en version 5.7.1.

⇒ Dans ces 3 cas allez à l'étape 1 ci-après.

- Vous aviez déjà une installation d'EDMUS autonome de version 5.7.1, et vous souhaitez passer à une installation en réseau.

⇒ Dans ce dernier cas passez directement à l'étape 13 ci-après.



## AVANT L'INSTALLATION

**Tous les utilisateurs doivent être déconnectés d'EDMUS avant de commencer la mise à jour.**

### 1. Important : commencez par faire une sauvegarde de votre base EDMUS


Si vous avez déjà une installation EDMUS,  
**assurez-vous de disposer d'une copie de sauvegarde récente de votre base EDMUS**  
 (le fichier contenant vos données patients) avant de procéder à l'installation.

La base est habituellement nommée « Edmus.df1 », mais peut avoir été renommée.

#### Si vous avez une base EDMUS 5 ou version supérieure : 2 possibilités


- *Faites la sauvegarde directement à partir d'EDMUS*

Choisissez « Sauvegarder la base de données » dans le menu « Administrateur » pour **faire une copie de votre base de données** à l'emplacement de votre choix.

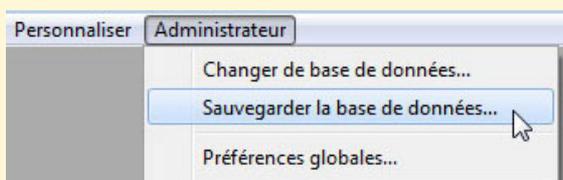

- *Ou bien faites la sauvegarde manuellement*

Pour savoir où se trouve votre base de données, choisissez « À propos d'EDMUS » dans le menu « Fichier » :

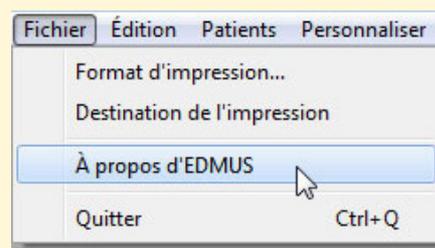


Dans la fenêtre qui s'ouvre, le chemin d'accès à la base est affiché :

```
Base de données C:\USERS\PUBLIC\EDMUS SOFTWARE
V5\EDMUS data\Edmus.df1
```

**Faites une copie de ce fichier** avant de poursuivre l'installation.


Important : s'il y a aussi un fichier de même nom que la base et d'extension .DF2, copiez-le aussi, il fait partie de la base.

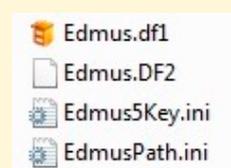


### Si vous avez une base EDMUS 4 ou 4.1

- o *Faites la sauvegarde manuellement*

Pour savoir où se trouve votre base de données, choisissez « Changer de base de données » dans le menu « Administrateur » :

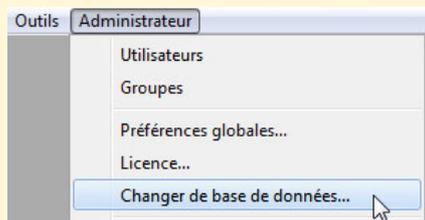

Dans la fenêtre qui s'ouvre, le chemin d'accès à la base est affiché :

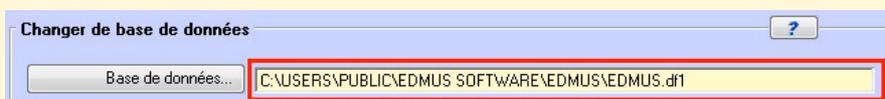

- o **Faites une copie de ce fichier** avant de poursuivre l'installation.

### NE CONTINUEZ PAS AVANT DE DISPOSER D'UNE COPIE DE SAUVEGARDE DE VOTRE BASE DE DONNEES EDMUS.

Placez cette copie en lieu sûr, à un **autre** emplacement (disque dur externe, clé USB etc.) que la base originale.

Si vous ne trouvez pas la base à sauvegarder, veuillez contacter le support technique ([support@edmus.org](mailto:support@edmus.org)).

## 2. Si vous ne l'avez pas déjà fait, téléchargez EDMUS 5.7.1 depuis le site EDMUS

[http://www.edmus.org/fr/soft/edmus\\_dl.php](http://www.edmus.org/fr/soft/edmus_dl.php)



Le fichier « EDMUS 5.7.1 - Installation.zip » téléchargé est un dossier zippé, dézippez-le :

- o *Windows*: clic droit sur le fichier, puis choisissez « Extraire » ou « Extraire tout » (l'intitulé peut varier selon la version de Windows).
- o *Mac*: double-clic sur le fichier.

Le dossier « EDMUS 5.7.1 - Installation » sera créé à côté du fichier .zip.



Le dossier « EDMUS 5.7.1 - Installation » contient :

- o le programme d'installation lui-même (« EDMUS 5.7.1 installer »),
- o et les instructions d'installation en français et en anglais.



OFSEP  
Observatoire Français  
de la Sécurité des Personnes

POS-SUP-04b EDMUS-Instructions d'installation et mise à jour (installation réseau) Version 2.0 applicable le 28/10/2019

Copyright © 2019 Centre de coordination EDMUS, Lyon – [www.edmus.org](http://www.edmus.org) – [support@edmus.org](mailto:support@edmus.org)

## L'INSTALLATION

### 3. Lancez le programme d'installation

Sur le premier ordinateur où vous voulez installer EDMUS 5.7.1, faites un double clic sur le programme d'installation (« EDMUS 5.7.1 installer ») pour commencer l'installation d'EDMUS.




*Windows*

*Mac*

#### Remarque sur les réglages de sécurité de l'ordinateur

Lors du premier lancement du programme d'installation d'EDMUS, en fonction des réglages de sécurité de votre ordinateur, vous pourrez être confronté à un message disant que le programme d'installation provient d'un « éditeur inconnu » ou d'un « développeur non identifié » :

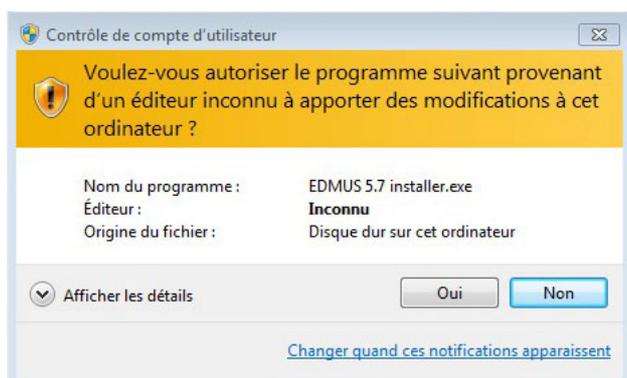

*Sous Windows*

Cliquez « Oui » pour « autoriser le programme suivant provenant d'un éditeur inconnu à apporter des modifications à cet ordinateur ».



*Sous Mac OS X*

Faites un clic droit sur l'installateur, choisissez « Ouvrir », puis cliquez « Ouvrir » dans la fenêtre de dialogue qui apparaît.



## 4. Procédez à l'installation

Lors de l'installation, trois cas peuvent se présenter :

### CAS 1 : Vous installez EDMUS pour la première fois sur cet ordinateur

Aucune option ne sera proposée. Acceptez les termes de la licence, puis laissez l'installation se dérouler.


#### Ce qui va se passer

EDMUS 5.7.1 sera installé, avec une base de données vide (sans patient).

### CAS 2 : Il y a déjà une version antérieure d'EDMUS 5 (5.0 à 5.7.1) sur cet ordinateur

Acceptez les termes de la licence, puis sélectionnez l'option « MISE À JOUR » (elle sera sélectionnée par défaut).

Puis laissez l'installation se dérouler.

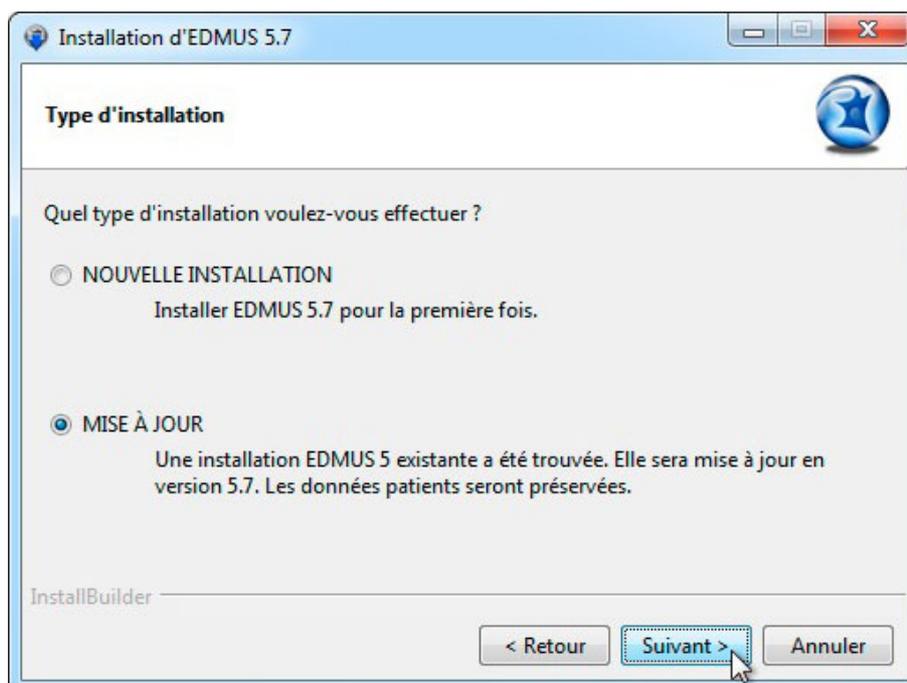

#### Ce qui va se passer

EDMUS 5.7.1 sera installé, en remplacement d'EDMUS 5 (5.0 à 5.7), avec une base de données vide (sans patient).


Votre base de données EDMUS en réseau (avec vos données patients) ne sera pas touchée.



**CAS 3 : Il y a déjà EDMUS 4.0 ou 4.1 sur cet ordinateur**

Acceptez les termes de la licence, puis sélectionnez l'option « MISE À JOUR » (elle sera sélectionnée par défaut).

Puis laissez l'installation se dérouler.

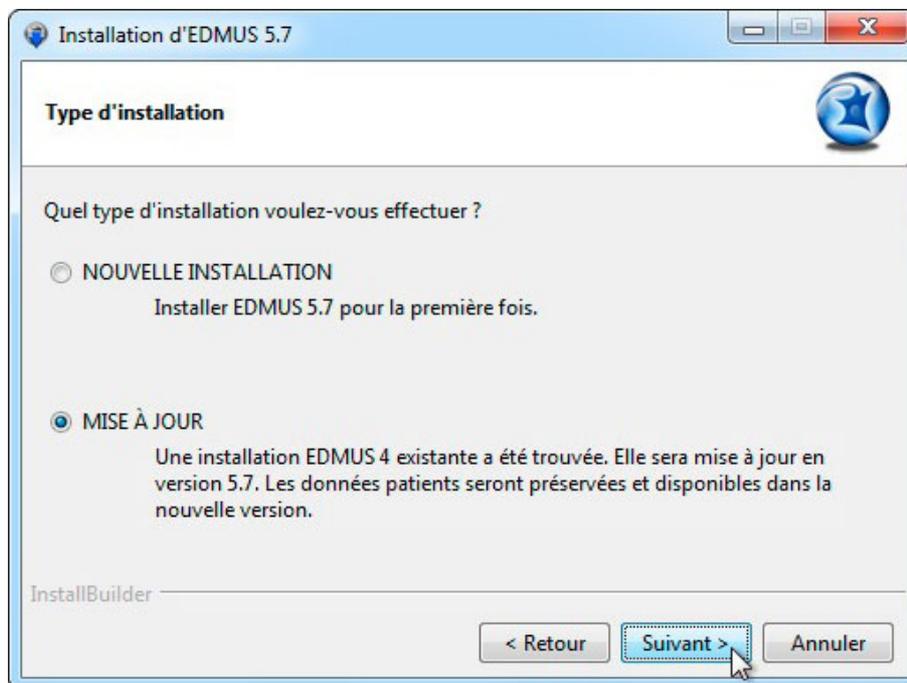***Ce qui va se passer***

EDMUS 5.7.1 sera installé, sans remplacer EDMUS 4.0 ou 4.1, avec une base de données vide (sans patient).

Votre base de données EDMUS 4 en réseau (avec vos données patients) ne sera pas touchée.

**À la fin de l'installation**, l'installateur recommandera la désinstallation d'EDMUS 4 :

laissez cette case **cochée** pour désinstaller EDMUS 4, et cliquez « Terminer ».

**Fin de l'installation d'EDMUS 5.7**

EDMUS 5.7 a été installé avec succès sur votre ordinateur.

Désinstaller EDMUS 4 (VIVEMENT RECOMMANDÉ)



## APRÈS L'INSTALLATION sur le 1<sup>er</sup> ordinateur

### TRÈS IMPORTANT

Si vous aviez déjà une base EDMUS en réseau (EDMUS 5 ou 4) :

**NE LANCEZ PAS ENCORE EDMUS 5.7.1**

Allez à l'étape 5

Sinon, s'il s'agit d'une première installation (pas de base EDMUS antérieure),  
ou si vous aviez une installation EDMUS autonome (pas de base en réseau) :

Allez à l'étape 6

### 5. Si vous aviez déjà une base EDMUS en réseau (EDMUS 5 ou 4) : placez une copie de la base dans la nouvelle installation

À l'étape 1, vous avez fait une copie de sauvegarde de votre base de données. S'il s'agissait d'une base en réseau, il faut maintenant **placer une autre copie de cette base dans l'installation EDMUS 5.7.1** que vous venez de créer.

Lors du premier lancement d'EDMUS 5.7.1, cette base de données EDMUS 5 ou 4 sera mise à jour au nouveau format d'EDMUS 5.7.

#### *Pourquoi une copie locale ?*

Parce que l'étape de mise à jour de la base (étape 7 ci-après) sera ainsi plus rapide et plus sûre, sans risque d'interruption du réseau.

(Vous replacerez la base sur le serveur à une étape ultérieure : voir étape 13).

Procédez comme suit :

- Faites une **nouvelle copie** de la copie de sauvegarde de votre base de données. **Renommez** cette deuxième copie « Edmus.df1 ».
- Puis placez cette deuxième copie renommée **sur l'ordinateur où vous venez d'installer EDMUS 5.7.1**, à l'emplacement suivant (en remplacement du fichier Edmus.df1 qui s'y trouve déjà, le cas échéant) :

(pour Windows XP)


C:\Program Files\EDMUS Software v5\EDMUSdata\Edmus.df1

(pour Windows Vista, 7, 8, 10)

C:\Users\Public\EDMUS Software v5\EDMUSdata\Edmus.df1

(pour Mac OS X)

/Applications/EDMUS Software v5/EDMUSdata/Edmus.df1

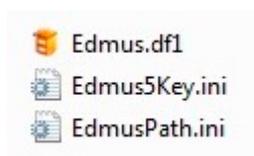

## 6. Lancez EDMUS 5.7.1 pour la première fois

### o Sous Windows

Lancez EDMUS 5.7.1 par un double clic sur le raccourci « EDMUS 5 » qui aura été placé sur le Bureau.

### o Sous Mac

Lancez EDMUS 5.7.1 par un clic sur le raccourci « EDMUS 5 » qui aura été placé dans le Dock.



## 7. Mettez à jour votre ancienne base EDMUS le cas échéant


Si vous aviez déjà une base EDMUS antérieure, il vous faut maintenant mettre à jour la base de données elle-même (le fichier contenant vos données patients) au nouveau format d'EDMUS 5.7 :

- o S'il s'agissait d'une base en réseau, vous en avez placé une copie dans la nouvelle installation EDMUS 5.7.1 à l'étape 5.
- o Sinon, s'il s'agissait d'une base autonome, elle a été conservée au sein de l'installation EDMUS 5.7.1.

Deux cas peuvent se présenter selon la version d'EDMUS antérieure, correspondant aux CAS 2 et 3 ci-dessus :

### CAS 2 : Il y avait déjà une version antérieure d'EDMUS 5 (5.0 à 5.7)

Au premier lancement d'EDMUS 5.7.1, il vous sera demandé si vous souhaitez **mettre à jour la base de données au nouveau format d'EDMUS**, cliquez Oui :

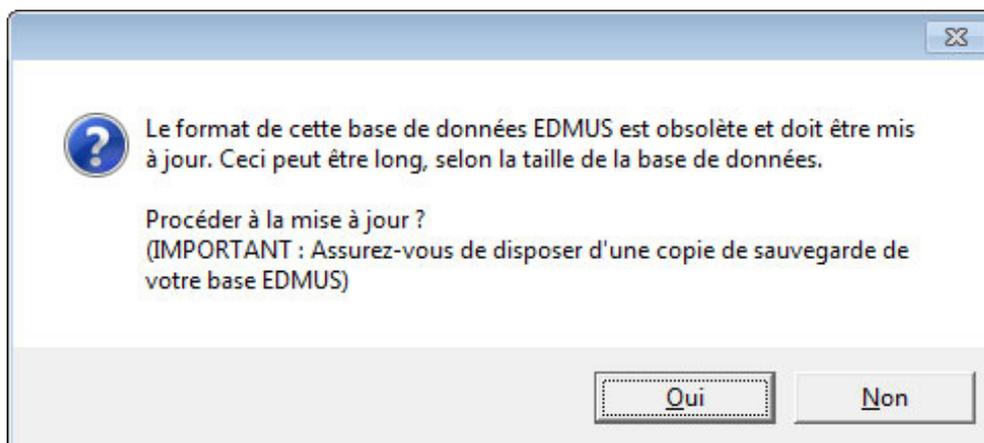


### ***Ce qui va se passer***

EDMUS 5.7.1 va automatiquement mettre à jour la structure du fichier de données. Attention, cette opération peut être longue, jusqu'à plusieurs heures pour une grosse base (plusieurs milliers de patients). Ceci dépend beaucoup de la puissance de votre ordinateur.



### CAS 3 : Il y avait déjà une base EDMUS 4 (4.0 ou 4.1)


- Au premier lancement d'EDMUS 5.7.1, la base de données EDMUS 4 sera automatiquement **convertie en Unicode** (si cette étape ne se lance pas automatiquement, choisissez l'option « Full conversion » quand le choix est proposé) :

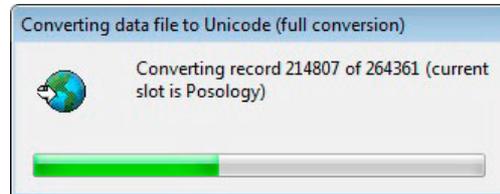

- Puis (exactement comme dans le CAS 1 ci-dessus), il vous sera demandé si vous souhaitez **mettre à jour la base de données au nouveau format d'EDMUS**, cliquez Oui.

## 8. Nom d'utilisateur et mot de passe


Au lancement (après la mise à jour de la base le cas échéant), EDMUS demandera *votre nom d'utilisateur et votre mot de passe*. Par défaut, il s'agit de ADMIN et ADMIN (ne pas tenir compte des majuscules ou minuscules), sauf si vous les aviez modifiés dans la base EDMUS antérieure que vous venez de mettre à jour.

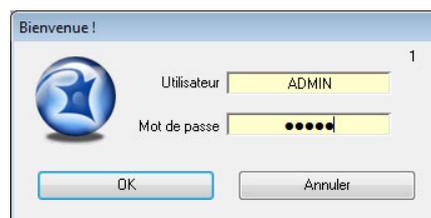

## 9. Lors du premier lancement : importation de nouveaux fichiers Thesaurus/Aide

**SEULEMENT EN CAS DE MISE À JOUR D'UNE VERSION EDMUS 4 ou 5 ANTÉRIEURE (CAS 2 ou 3 ci-dessus)**

Au premier lancement, EDMUS va **automatiquement importer de nouveaux fichiers Thesaurus et d'Aide** : ceci n'aura lieu qu'une fois, et ne durera que quelques minutes au maximum. Si vous avez ajouté des items au Thesaurus, ils seront conservés.

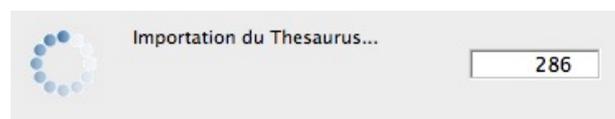

Remarque : si aux lancements suivants d'EDMUS cette étape d'importation se produit à nouveau, vous devrez **SUPPRIMER** manuellement les fichiers suivants éventuellement restés dans le dossier où EDMUS a été installé (EDMUS Software v5/EDMUSdata/) :

Countries.txt, Departements.txt  
 EDMUSV5\_EX.ETH, EDMUSV5\_ST.STH, EDMUSV5\_TH.THE, EDMUSV5\_TT.TTH  
 EDMUSV5.HLP, EDMUSV5.SCL



## 10. Activez votre licence EDMUS 5

Une fois EDMUS installé et (le cas échéant) la base de données mise à jour, **vous devez activer votre licence EDMUS 5.**

Sans licence, vous ne pourrez pas créer plus de 3 patients dans la base, et EDMUS cessera de fonctionner après une date donnée.

Si vous n'avez pas de licence EDMUS 5, ou que vous l'avez perdue, veuillez contacter le support technique ([support@edmus.org](mailto:support@edmus.org)). La licence est fournie sous la forme d'un fichier .zip.

Pour activer votre licence EDMUS 5 :

- o Dézippez le fichier, vous obtiendrez un ou plusieurs fichier(s) avec une extension ".ini" (par exemple "B1286.ini"), correspondant chacun à une licence EDMUS.
- o Lancez EDMUS 5, et choisissez « À propos d'EDMUS » dans le menu « Fichier ».
- o Dans la fenêtre qui s'ouvre, cliquez le bouton « Activer licence ».
- o Allez sélectionner un fichier de licence.
- o Vous verrez alors les items « Numéro de série EDMUS », « License accordée à » et « ID-Base » se mettre à jour avec vos données.




## 11. Langue & Configuration d'EDMUS

### o **Langue**

Lors du premier lancement d'une nouvelle installation EDMUS, le programme sera par défaut en anglais.

Si vous souhaitez qu'EDMUS utilise le français, ou une autre langue :

- Choisissez « User Preferences » dans le menu « Customize ».

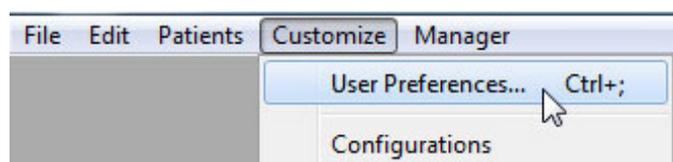

- ▶ Puis, dans la fenêtre « User Preferences » qui s'est ouverte, cliquez « Modifier », sélectionnez la langue à utiliser, et cliquez « OK ».



## ○ Configuration

Une configuration est un **mode de présentation** des données, sous une forme plus ou moins détaillée ou adaptée à un usage donné.

Lors du premier lancement d'une nouvelle installation EDMUS, le programme sera par défaut dans la configuration dite « Light », qui présente seulement les champs principaux de la base.

Vous pouvez changer de configuration :

- ▶ Choisissez « Préférences utilisateur » dans le menu « Personnaliser ».
- ▶ Puis, dans la fenêtre « Préférences utilisateur » qui s'est ouverte, cliquez « Modifier », sélectionnez la configuration souhaitée, et cliquez « OK ».



Les configurations disponibles sont les suivantes :

- ▶ **Premium** : la plus complète (présente tous les champs de la base),
- ▶ **Light** : simplifiée (ne présente qu'une partie des champs de la base),
- ▶ **EDEN** : plus particulièrement adaptée aux patients atteints de maladie de Devic/NMOSD.

Dans tous les cas, la base de données est la même, il s'agit seulement d'une différence de présentation.

## 12. Quittez EDMUS

---

Avant de passer à l'étape suivante, quittez EDMUS (menu « Fichier » -> « Quitter »).



## INSTALLATION EN RÉSEAU

Après avoir installé EDMUS 5.7.1 sur un premier ordinateur, et le cas échéant mis à jour la base de données au format EDMUS 5.7, il faut :

- placer la base EDMUS sur le serveur, et faire pointer le logiciel EDMUS 5.7.1 vers cette base partagée,
- installer EDMUS 5.7.1 sur les autres ordinateurs qui doivent accéder à la base partagée.

### 13. Placez votre base sur le serveur

**Vous allez maintenant placer votre base EDMUS sur un ordinateur en réseau (serveur),** auquel tous les ordinateurs qui doivent utiliser EDMUS peuvent avoir accès.

- *S'il s'agit d'une première installation d'EDMUS*  
Placez une base EDMUS vide (sans patient) sur le serveur.
- *Si vous aviez déjà une base EDMUS autonome de version antérieure (4.0 à 5.7)*  
Dans le dossier EDMUS 5.7.1 installé, votre ancienne base a été mise à jour (voir les étapes 6 à 7 ci-dessus) : placez cette base mise à jour sur le serveur.
- *Si vous aviez déjà une base EDMUS en réseau de version antérieure (4.0 à 5.7)*  
Vous disposez maintenant, dans le dossier EDMUS 5.7.1 installé, d'un fichier Edmus.df1 qui est une copie locale mise à jour de votre ancienne base de données en réseau (voir les étapes 5 à 7 ci-dessus) : placez cette base mise à jour sur le serveur.
- *Si vous aviez déjà une base EDMUS autonome de version 5.7.1*  
Placez cette base sur le serveur.

Dans tous ces cas, la base à placer sur le serveur se trouve dans le dossier EDMUS 5.7.1 installé, à l'emplacement suivant :

(pour Windows XP)  
C:\Program Files\EDMUS Software v5\EDMUSdata\Edmus.df1

(pour Windows Vista, 7, 8, 10)  
C:\Users\Public\EDMUS Software v5\EDMUSdata\Edmus.df1

(pour Mac OS X)  
/Applications/EDMUS Software v5/EDMUSdata/Edmus.df1

Ensuite :


- Une fois la base placée sur le serveur, il est recommandé de **supprimer la base de l'installation EDMUS 5.7.1** (ceci évitera à un utilisateur non averti de se reconnecter dessus par erreur si le réseau est temporairement indisponible, aboutissant à la confusion entre les 2 bases).
- Il est recommandé de **ne pas conserver la base de données antérieure au même emplacement que la nouvelle base** (pour éviter toute confusion ou mise à jour accidentelle de la base antérieure), la placer ailleurs.
- Vous pouvez renommer la base sur le serveur si vous le souhaitez, p. ex. « Edmus57.df1 ».




## 14. Faites pointer EDMUS vers la base partagée sur le serveur

**Vous allez maintenant indiquer au logiciel EDMUS d'accéder à la base partagée sur le serveur.**

- Sur l'ordinateur où vous avez installé EDMUS 5.7.1, lancez EDMUS.  
Dans le menu « Administrateur », choisissez « Changer de base de données... » :

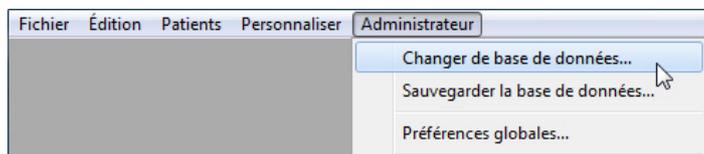

- Dans la fenêtre qui s'ouvre, cliquez « Base de données... » et allez trouver la base partagée sur le serveur :

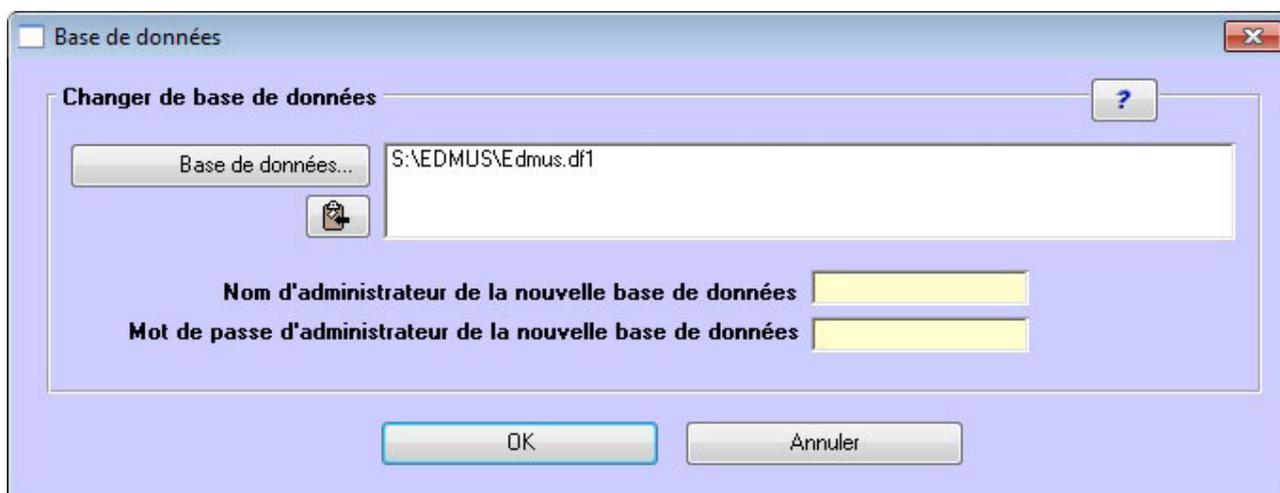

Puis saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe administrateur (« ADMIN » et « ADMIN » s'il s'agit d'une nouvelle base vide, ou bien ceux que vous utilisiez pour l'ancienne base), et cliquez « OK ».

- S'il s'agit d'une base mise à jour, il vous reste à vérifier qu'EDMUS est bien connecté à celle-ci. Pour cela, sélectionnez « Liste des patients » dans le menu « Patients », et cliquez « Afficher les patients » : vous devriez retrouver l'ensemble des patients de votre ancienne base.

## 15. Installez EDMUS sur les autres ordinateurs

Il vous reste à **installer ou mettre à jour EDMUS sur chacun des autres ordinateurs** qui doivent accéder à la base partagée.

Sur chacun de ces autres ordinateurs, suivez les étapes suivantes décrites plus haut :

- « **3. Lancez le programme d'installation** »
- « **4. Procédez à l'installation** »

Si la question est posée, et que vous aviez déjà EDMUS (avec une licence valide) sur l'ordinateur, sélectionnez « MISE À JOUR » dans les options proposées.

- AVANT de lancer EDMUS 5.7.1 pour la première fois sur cet ordinateur, il est utile de SUPPRIMER les fichiers suivants que l'installateur aura placés dans le dossier EDMUS Software v5/EDMUSdata :

adresse_adresse.fix	EDMUSV5_EX.ETH
adresse_patient.fix	EDMUSV5_ST.STH
Countries.txt	EDMUSV5_TH.THE
Departements.txt	EDMUSV5_TT.TTH
	EDMUSV5_HLP
	EDMUSV5_SCL

Sinon, l'importation des thesaurus dans la base partagée (étape 9 décrite plus haut) sera refaite inutilement, alors que vous l'avez déjà effectuée lors de l'installation d'EDMUS sur le premier ordinateur.

- « **6. Lancez EDMUS 5.7.1 pour la première fois** »
- « **8. Nom d'utilisateur et mot de passe** »
- « **10. Activez votre licence EDMUS 5** »
  - Chaque ordinateur doit avoir une licence EDMUS valide.
  - Si vous souhaitez que plusieurs ordinateurs puissent accéder à la base en même temps, chaque ordinateur doit porter une licence différente.
- « **11. Langue & Configuration d'EDMUS** »
 

Changez de langue et de configuration si vous le souhaitez.
- « **14. Faites pointer EDMUS vers la base partagée sur le serveur** »

### TRÈS IMPORTANT :

**Installez EDMUS 5.7.1 sur TOUS les ordinateurs connectés à la base partagée.**

Pour pouvoir accéder à la base,  
tous les ordinateurs DOIVENT utiliser la MÊME version d'EDMUS.

### EDMUS 5.7.1 - DERNIERE VERSION D'EDMUS

**La version 5.7.1, sortie le 2019-05-06, est la dernière version d'EDMUS.**

Le développement du logiciel est arrêté et aucune version ultérieure ne sera produite.  
Le support technique reste disponible.

Important : Veuillez noter que, bien qu'EDMUS 5.7.1 soit compatible avec Windows 10, il n'est pas certifié sur cette plateforme et peut ne pas fonctionner de façon optimale.

